

OCUhyf C®

kapljice za oko, raztopina, brez konzervansov
natrijev hialuronat

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

1. Kaj je OCUhyf C n za kaj ga uporabljamo

OCUhyf C so sterilne kapljice za oko, raztopina brez konzervansov, ki vsebujejo natrijev hialuronat in naravni izvleček ognjiča. Imajo vlažilni, pomirjajoči in mazalni učinek. Ker vsebujejo hialuronsko kislino (naravno snov, ki se nahaja v očesu in drugih delih telesa), te kapljice za oko zagotavljajo takojšnje olajšanje in dolgotrajno udobje pri suhem in pekočem občutku ali pri utrujenih očeh. Naravni izvleček ognjiča ima zaščitni, protivnetni in regeneracijski učinek na epitel očesa.

OCUhyf C se uporabljajo ob pomanjkanju naravnih solz, za vlaženje, zaščito in za mazanje površine očesa, in v pogojih, povezanih s simptomi suhega očesa:

- keratoconjunctivitis sicca (premajhna količina solz, žarenje, gorenje, fotofobija, občutek prisotnosti tujka v očesu)
- poškodbe roženice, razjede (erozije) roženice, operacije roženice
- hormonske spremembe (menopavza)
- dolgotrajno gledanje v računalnik, dolgotrajna vožnja, dolgi leti
- klima, veter, mraz, suh zrak, prah, dim, onesnažen zrak

OCUhyf C ne vsebuje nobenih konzervansov zato je idealen izdelek za osebe ki nosijo kontaktne leče in za osebe z občutljivimi očmi.

OCUhyf C lahko uporabljajo odrasli, mladostniki in otroci.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili OCUhyf C

OCUhyf C ne uporabljajte, če ste preobčutljivi na učinkovino ali katero koli sestavino kapljic za oči OCUhyf C .

Če hkrati uporabljate tudi še kakšne druge izdelke za oči (kapljice ali mazila), je na splošno bolje, da počakate vsaj 5 minut med uporabo vsakega izdelka.

3. Kako uporabljati OCUhyf C


Običajno vkapajte 1 kapljico raztopine v oko (oči) 1 do 3-krat na dan, vendar jo lahko uporabljate tudi pogosteje. OCUhyf C lahko uporabljate dlje časa.

Uporabniki kontaktnih leč

OCUhyf C lahko uporabljate med nošenjem kontaktnih leč.

Opozorilo pred uporabo:

1. Umijte si roke in se udobno namestite v sedeč ali stoječ položaj.
2. Odvijte pokrovček plastenke.

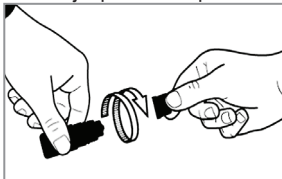


3. Plastenko držite med palcem in prsti, obrnjeno navzdol.
4. Pred prvo uporabo je priporočljivo, da z nežnim stiskanjem plastenke prvo iztisnjeno kapljico ne vkapljate v oko, saj se z močnim in nepravilnim stiskanjem plastenke lahko raztopina iztisne v večjem volumnu.
5. S prstom nežno povlecite navzdol spodnjo veko obolelega očesa.



6. Konico kapalke približajte očesu, vendar se ne sme dotakniti očesa ali njegove okolice.
7. Rahlo stisnite plastenko, da vkapate v oko samo eno kapljico. Nato spustite spodnjo veko in počasi zaprite oko, tako da se raztopina OCUhyf C enakomerno porazdeli po površini očesa.

Za naslednjo kapljico pustite, da se zrak vrne v plastenko in ta poprime prvotno obliko, nato pa izdelek še naprej uporabljajte, kot je priporočeno. Upoštevajte, da lahko pride do nekaj sekundne zamude med stiskanjem plastenke in vkapanjem kapljice. Plastenke ne stiskajte premočno.

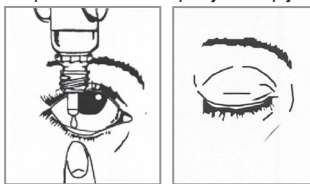

8. Po potrebi postopek ponovite na drugem očesu.



9. Po uporabi, ne da bi se dotaknili konice, plastenko obrnite navzdol in enkrat pretresite, da odstranite z konice zaostalo raztopino. To je potrebno za zagotovitev sterilnosti očesnih kapljic in lažje vkapanje kapljice pri naslednjem nanosu.

10. Takoj po uporabi tesno zaprite pokrovček plastenke.

4. Možni neželeni učinki

Zelo redko se neposredno po vkapljanju prehodno pojavi rahlo pekoč občutek ali alergijska reakcija na nekatere snovi tega izdelka.

Če se pojavi katerikoli od teh neželenih učinkov ali katerakoli druga nenavadna reakcija, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

5. Kaj vsebuje OCU^{hnyl}C

1 ml raztopine vsebuje 1,2 mg natrijevega hialuronata.

Pomožne snovi: izvleček ognjiča, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat, natrijev acetat trihidrat, natrijev citrat, prečiščena voda.

6. Kako shranjevati OCU^{hnyl}C in ostale informacije

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte.

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Raztopine ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Odprto plastenko je treba porabiti v 3 mesecih.

Ne uporabljajte raztopine po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki ali škatli poleg ikone za pečeno uro. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Pakiranje: 1 kapalna plastenka z 10 ml raztopine



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovaška republika

Tel: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu

CE 2265

STERILE A

To navodilo je bilo nazadnje posodobljeno aprila 2020.