

MediGel®

gel za celjenje ran



Navodila za uporabo - pozorno preberite!

MediGel® gel za celjenje ran

Hidroaktivni lipogel s cinkom in železom za vlažno zdravljenje kožnih ran.

Predviden namen

MediGel® gel za celjenje ran je lipogel za zunanje zdravljenje akutnih ran (npr. odrgnin, ureznin, prask in ugriznih ran* ter razpok in raztrganin) ter opeklin 1. in 2. stopnje (mehurjev) in sončnih opeklin.

* Pri ugriznih ranah se je treba zaradi velikega tveganja za okužbo pri začetnem zdravljenju nujno posvetovati z zdravnikom.

Lastnosti

MediGel® gel za celjenje ran je bel lipogel brez vonja s hidroaktivnimi lastnostmi, ki združuje vlažilne lastnosti gela in negovalne lastnosti kreme. Primeren je za uporabo na suhih in zmerno mokrih ranah. MediGel® gel za celjenje ran zagotavlja načela vlažnega celjenja ran na več načinov za optimalno celjenje poškodovane kože. Nizka vrednost pH, podprta s prisotnostjo ionov cinka in železa, aktivira naravni proces celjenja in sproži nastajanje novega tkiva. Naravna negovalna olja in vitamin E podpirajo obnavljanje poškodovane kože. MediGel® gel za celjenje ran ljudje zelo dobro prenašajo, zato se lahko uporablja pri vsej družini, tudi pri otrocih in na občutljivi koži.

MediGel® gel za celjenje ran zaradi fizikalnih lastnosti kreme ustvarja naslednje pogoje za celjenje ran:

- Hitro lajšanje bolečine in hlajenje.
- Vzpostavitev primerne mikroklimе v rani.
- Spodbuja celjenje rane.
- Zmanjša oteklino.
- Zmanjša tveganje za okužbo.
- Zmanjša brazgotinjenje.


Navodila za uporabo

Pred nanosom na rano in po njem si umijte roke. Pred zdravljenjem z MediGel® gelom za celjenje ran je treba rano skrbno očistiti.


Na očiščeno rano in čez robove rane (rana se celi od zunaj navznoter) nanesite približno 2 mm debelo plast MediGel® gela za celjenje ran. V prvih dneh po poškodbi lahko MediGel® gel za celjenje ran nanesete večkrat na dan.

Uporabljamo ga lahko v kateri koli fazi celjenja rane, dokler rana ni popolnoma zaceljena. Poskrbite, da vsebino nanesete higienično, tako da odprtina tube ne pride v stik z rano. MediGel® gel za celjenje ran je priporočljivo uporabljati v kombinaciji s komercialno dostopnim obližem ali povojem, ki bo zagotovil dodatno zaščito rane.


MediGel® gel za celjenje ran ne vsebuje snovi, ki dražijo kožo in se lahko uporablja v predelu sluznice (npr. nosu) ali na ustih.

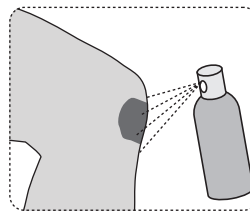


Očistite

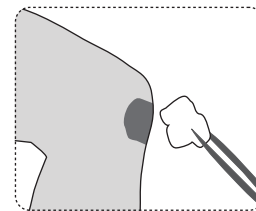

Osušite

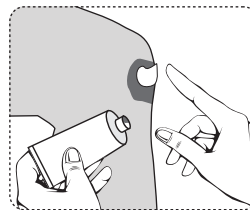

Nanesite

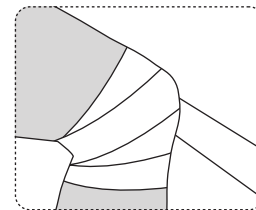

Prekrijte



Größe (offen): 164 x 297 mm

Größe (gefalzt):

Zeichnungsnummer: --

Laetuscode-Nr.: --

Erstellt am: 12.01.24

Art.-Nr.: 403091049201

Art.-Bez.: GI MediGel SI

Farben: ■ Schwarz

Previdnostni ukrepi

- MediGel® gel za celjenje ran je namenjen samo za zunanjo uporabo in se ga ne sme zaužiti.
- Ne uporabljajte v primeru znane preobčutljivosti na katero koli sestavino. Če se pojavi alergijska reakcija (kožni izpuščaj), prenehajte z uporabo lipogela.
Nato lipogel previdno sperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom.
- MediGel® gela za celjenje ran ne uporabljajte na vekah ali v očeh. Če pride MediGel® gel za celjenje ran v stik z očmi, jih izperite s tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom.
- MediGel® gela za celjenje ran ne kombinirajte z izdelki, ki vsebujejo srebro ali okluzivnimi oblogami.
- Pri zelo velikih ranah, ranah z močnim izcedkom ali okuženih ranah se pred uporabo MediGel® gela za celjenje ran posvetujte z zdravnikom, saj bo morda potrebno dodatno zdravljenje.
- Če rana postane rdeča, boleča ali otekla ali če se rana v nekaj dneh ne zaceli, se posvetujte z zdravnikom.
- Če ste noseči ali dojite, lahko MediGel® gel za celjenje ran uporabljate le po posvetu z zdravnikom.
- Pri opeklinah stopnje 2b se je treba posvetovati z zdravnikom.
- Izogibajte se stiku s hrustančnim tkivom. MediGel® gela za celjenje ran ne smete uporabljati na intimnem predelu.

Interakcije

Izdelka ne smete kombinirati z drugimi kremami ali mazili.

Neželeni učinki

Za morebitne alergijske reakcije glejte poglavje „Previdnostni ukrepi“. Če opazite kakršne koli neželene učinke, o tem obvestite farmacevta ali proizvajalca.

Navodila za shranjevanje

- Hranite zaščiteno pred mrazom in vročino! Lipogel shranjujte na suhem mestu in v originalni embalaži, pri temperaturi med 5 °C in 30 °C.
- Po uporabi tubo zaprite. V ta namen uporabljajte samo originalni pokrovček.
- MediGel® gela za celjenje ran ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na embalaži.
- Rok uporabe: 3 leta po izdelavi (tuba), 2 leti po izdelavi (vrečica).
- Rok uporabe: 90 dni po odprtju (tuba), za enkratno uporabo (vrečica).
- Prosimo, ne uporabljajte poškodovanih tub. Prepričajte se, da je pečat nepoškodovan.
- MediGel® gel za celjenje ran je treba hraniti zunaj dosega otrok!

Sestavine

Prečiščena voda, oktildodekanol, hidrogenirani palmيني gliceridi, PEG – 200 hidrogenirani gliceril palmat, cetilalkohol, hidroksipropil škrobni fosfat, tokoferol, benzilalkohol (in) metilkloroizotiazolinon (in) metilizotiazolinon, poliaminopropil bigvanid, silicijev dioksid, elementi v sledovih (cink, železo).

Velikosti pakiranja

Tube po 5 g, 10 g, 20 g in 50 g ter vrečke po 2 g. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Proizvajalec

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn
Telefon: +49 (0) 2371 937-0
Faks: +49 (0) 2371 937-329
E-pošta: info@medice.de
www.medice.de

So-distributer

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 35, 38259 Salzgitter
Telefon: +49 5341 307-0
Faks: +49 5341 307-124
E-pošta: info@schaper-bruemmer.de
www.schaper-bruemmer.de

Kontakt za Slovenijo:

Stada d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
www.stada.si

Stanje informacij: marec 2023

Razlaga simbolov na zunanji škatli



Upoštevajte navodila za uporabo



Uporabno do



Številka partije



Medicinski pripomoček



Ne uporabljajte poškodovane tube



Omejitev temperature



Proizvajalec



Samo za enkratno uporabo (vrečka 2 g)



Zaščitite pred sončno svetlobo



Zaščitite pred vlago

